

INOHZQ Serisi Osilatörler

Kolay kurulum ve kullanıma sahip LCD Ekran.
İş verimliliğini büyük ölçüde arttıran masa tablaları, 304 paslanmaz çelikten imal edilme, kolay temizlenebilme ve monte veya demonte edilebilme özelliklerine sahiptir.

Kalite Güvencesi

Güç kesildiğinde, orijinal ayar prosedürü temelinde çalışan parametreleri otomatik olarak saklar.

Mikrobilgisayar, osilasyon frekansını zamanlama fonksiyonuyla kontrol eder.


Dönme hızını kontrol eden benzersiz devre, çalkalayıcının dengeli bir şekilde çalışmasını sağlarken, kaptaki sıvının sıçramasını ve cihaza zarar gelmesini önler.

Döndürme hızı izleme devresi, ekipmanın güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için dönme hızını kontrol eder.

Sürekli Çalışma Garantisi

Uzun ömürlü düşük ısı dağılımı ile DC Motor, bakım gerektirmeyen yapısıyla geniş bir hız kontrolü sağlar.

Dayanıklı yapı tasarımı, osilatörün tam yük koşullarında veya yüksek hızda yeterli güce sahip olmasını sağlar.

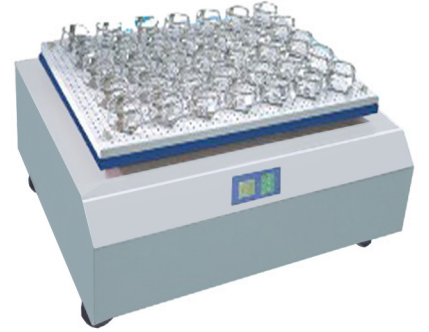

Teknik Özellikler;

Model	INOHZQ-L1	INOHZQ-L2	INOHZQ-H1	INOHZQ-H2
Ekran			LCD	
Hız Aralığı		20 - 300rpm		
Dönme Hızı Hassasiyeti		$\pm 1r/dk$		
Genişlik		35mm / 50mm		
Zamanlama Aralığı		0 - 500h		
Stanfart Konfigürasyon		60 x 500ml		70 x 1000ml
Maksimum Konfigürasyon	48 x 250ml or 30 x 500ml 20 x 1000ml or 12 x 2000ml		63 x 250 or 35 x 500ml 35 x 1000ml or 16 x 2000ml	
Platform Boyutu (mm)		800x600		920x640
Platform Sayısı	1	2	1	2
Ortalama Boyut (mm)		900x680x680		1060x850x680
Güç Gereksinimi		400W		
Güç Kaynağı		AC220V $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 2\%$		