


## INOKLF Serisi Kül Fırını

Kül fırını, kullanıldığı yere sabitlenmemiş, endüstriyel fırınlara göre daha küçük hacimli ve çalışma sıcaklıkları 1000°C'nin üzerinde olan cihazlardır.

Kül fırınları çok farklı alanlarda kullanılırlar; Gıda sektöründe numuneyi yakarak kül oranı tayininde, Plastik sektöründe hammadde kalitesi analizinde, Metal sektöründe ısıl işlem fırını olarak, Seramik sektöründe numune hazırlamada, Üniversite laboratuvarlarında deney amaçlı olarak kullanılmaktadırlar.

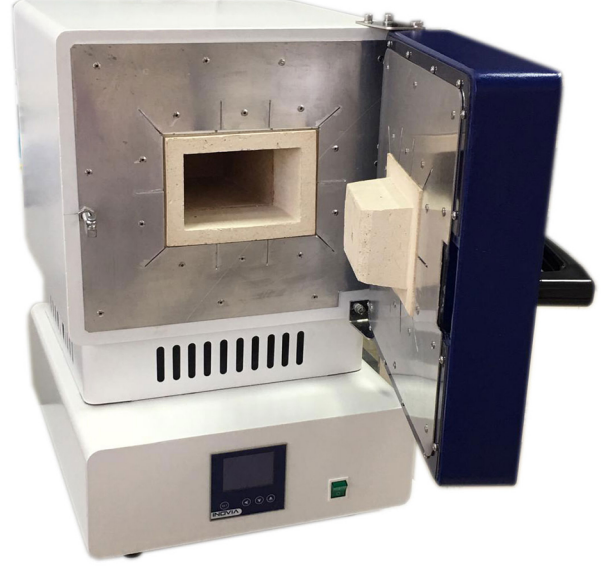

### Özellikler:

INOKLF serisi, profesyoneller için ekonomik bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Bu modeller, genel prosedürleriniz için en uygun şekilde kullanılabilir.

INOKLF serisi fırınlar, 1000 ° C ile 1600 ° C arasında çalışacak şekilde tasarlanmıştır; bunların hepsi, kolay kullanım için ön yüklemeye ve daha serin bir dış kasayı korumak için benzersiz iç yapıya sahiptir.

Ürünün tipik uygulamaları erime, termal yaşlanma, seramik sinterleme, metal ısıl işlem, kimyasal ayrışma ve termal şok testidir.

### Teknik Özellikler ;

Model	Kapasite (L)	Maks. Sıcaklık	Güç Kaynağı (KW)	Isıtma Elemanı
INOKLF1000-2L	2	1000°C	220V 50Hz 2.5	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1000-7L	7	1000°C	220V 50Hz 4	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1000-16L	16	1000°C	380V 50Hz 8	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1000-30L	30	1000°C	380V 50Hz 12	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1000-70L	70	1000°C	380V 50Hz 15	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1000-84L	84	1000°C	380V 50Hz 18	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1200-2L	2	1200°C	220V 50Hz 2.5	Nikrom Tel
INOKLF1200-7L	7	1200°C	220V 50Hz 5	Nikrom Tel
INOKLF1200-16L	16	1200°C	380V 50Hz 10	Nikrom Tel
INOKLF1200-30L	30	1200°C	380V 50Hz 12	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1200-70L	70	1200°C	380V 50Hz 15	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1200-84L	84	1200°C	380V 50Hz 18	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli
INOKLF1300-4L	4	1300°C	220V 50Hz 4	Silisyum Karbür Çubuk
INOKLF1300-6L	6	1300°C	220V 50Hz 6	Silisyum Karbür Çubuk
INOKLF1300-13L	13	1300°C	380V 50Hz 8	Silisyum Karbür Çubuk
INOKLF1300-18L	18	1300°C	380V 50Hz 10	Silisyum Karbür Çubuk
INOKLF1300-30L	30	1300°C	380V 50Hz 12	Silisyum Karbür Çubuk
INOKLF1600-5L	5	1600°C	380V 50Hz 8	Molibden Silikon Çubuk
INOKLF1600-13L	13	1600°C	380V 50Hz 12	Molibden Silikon Çubuk
INOKLF1600-30L	30	1600°C	380V 50Hz 18	Yüksek Kaliteli Elektrikli Soba Teli