


INOWBN Serisi Termostatik Su Banyoları

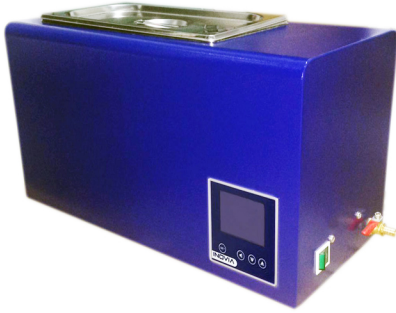

INOWBN Serisi Su Banyoları, tıbbi arıtma ve halk sağlığı, kolejler, üniversiteler, sanayi ve madencilik işletmeleri vb. bilimsel araştırma bölümlerinde ve kullanımını gerektiren alanlarda gerekli net sıcaklık veya yardımcı ısıtma sağlamak için tasarlanmıştır.

Özellikler;

1. Paslanmaz çelik iç hazne ve üst kapak.
2. Zamanlama işlevli mikroişlemci, yüksek hassasiyetli CPU çipi ve sıcaklığı daha hassas hale getiren ve cihazın kullanımını basitleştiren yüksek hassasiyetli platin dirençli PT100 sensörü ile PID kontrolü.
3. Sensör arıza alarmı, aşırı sıcaklık alarmı, kendi kendine teşhis dinamik kontrolü, sıcaklık kalibrasyonu, parametre belleği ve 999 dakikaya kadar zamanlama fonksiyonu.



Teknik Özellikleri;

Model	INOWBN-5E (Ekonomi) INOWBN-5L (Lüks)	INOWBN-13E (Ekonomi) INOWBN-13L (Lüks)	INOWBN-28E (Ekonomi) INOWBN-28L (Lüks)
Kapasite	5	13	28
Sıcaklık Aralığı (OS'da)	+5°C - 99°C	+5°C - 99°C	+5°C - 99°C
	+5°C - 99°C	+5°C - 65°C	+5°C - 65°C
Sıcaklık Kararlılığı		±0.5°C	
		±0.3°C	
Sıcaklık Çözünürlüğü		0.1°C	
Zamanlama Aralığı		0 - 999°C	
Ekran		LED	
İç Boyutlar (mm)	300x150x150	295x235x200	495x295x200
Dış boyutlar (mm)	550x250x220	580x320x270	800x500x300
Ambalaj Boyutları (mm)	650x350x320	680x420x370	860x550x400
Ağırlık (Kg)	11	11.8	17.4