


INODD Serisi İlaç / Tablet Çözünme Test Cihazları

INODD Serisi Akıllı Çözünme Test Cihazları, faydalı model ilaç çözünme test cihazı tarafından geliştirilen ileri teknoloji ve bileşenleri kullanır. Standart 2010 ulusal farmakopesi ile uyumlu kalite performansı.

Özellikler;

- 1.Kullanımı kolay bir LCD ekran arayüzüne sahiptir.
- 2.Otomatik kaldırma fonksiyonlu örnekleme iğnesi.
- 3.Ana bilgisayar işletim parametreleri önceden ayarlanmış ve otomatik depolanabilir, çoğaltmadan bir sonraki ön yükleme yapılabilir.
- 4.Hız kontrolü alt bölümü yol güç sürücü step motor hızı ve doğruluğu, düzgün çalışma, düşük enerji tüketimi.
- 5.Dahili PT100 sensörleri ile su banyosu, yazılım, POD modunu kullanır, hızlı, yüksek hassasiyetle ısınır, bir yazılım hatasıyla kolayca düzeltilebilir.
- 6.Zamanlama fonksiyonu, geçerli örnekleme noktasını zaman içindeki toplam örnekleme noktalarının toplam süresini görüntüler.
- 7.Çeşitli arıza sinyali verilen bir otomatik test fonksiyonuna ve otomatik koruma fonksiyonuna sahiptir.
- 8.İşletim sistemi yazılımı kurtarma, bir sıcaklık ön ısıtma zamanlama avansı vardır.
- 9.Görüntüleme ve deney için veri saklama, yazdırma ve USB depolama işlevine sahiptir.

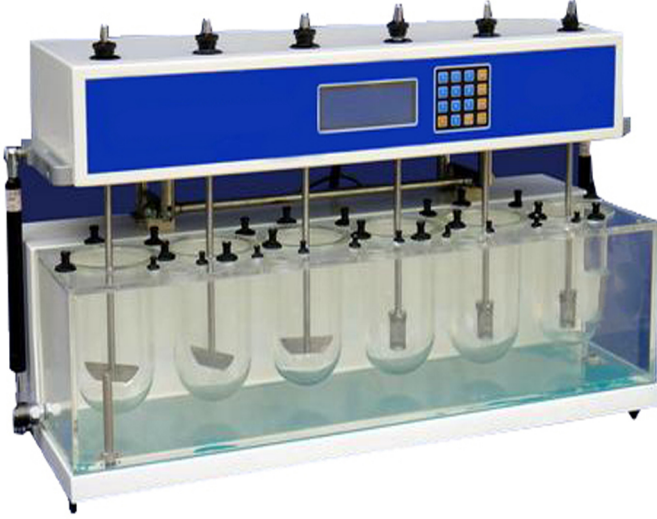

Teknik Özellikler;

Model	INODD-3	INODD-6	INODD-8
Kapasite	3	6	8
Karıştırıcı Pedal Kanatları		<0.5mm	
Turn Blue Swings		1<mm	
Hız Aralığı		25 - 250 r/dk	
Hız Çözünürlüğü		1 r/dk	
Sabit Hız Hatası		<1%	
Sıcaklık Aralığı	Yok	10 (OS) - 45°C	(OS) - 45°C
Sıcaklık Çözünürlüğü	Yok	0.01°C	0.1°C
Isıtma Gücü	Yok	Yok	1000W
Sıcaklık Hatası	Yok	<0.05°C	<0.1°C
Zamanlama Birikmeli Zaman		5999 dakikaya kadar geri sayım	
Örnekleme Döngüsü Süresi	10 farklı örnekleme periyoduna kadar, geri sayım		
Örnekleme Süresi		5999 dakikaya kadar geri sayım	
Güç Kaynağı		AC220V ±10% 50Hz	
Çalışma Şartları	Ortam Sıcaklığı: 0 - 40°C	Bağıl Nem: <80%HR	

