

INOS-P Serisi ASTM Tip I Ultra Saf Su Sistemleri

Özellikler;


INOS-P Serisi Ultra Saf Su Arıtma Sistemleri yem suyu olarak kaliteli saf suya gereksinim duymaktadır.

INOVIALAB INOROP/INOROP-E sistemleri ihtiyacınız olan kaliteli saf suyu, iyon değişimi, ters ozmoz veya optimal damıtma gibi işlemlerden geçirirerek sizlere ihtiyacınız olan kaliteli saf suyu sağlamaktadır.

Yem suyunda bulunan organik ve inorganik maddelerin içeriği, yüksek verimli INOVIALAB arıtma teknolojilerinin seri kombinasyonu ile limitlerine yaklaşan değerlere indirgenmiştir

Konfigürasyonlar;

INOS-P Sistemleri	INOS-PUV	INOS-PVF
Depolama Tankı 30L	O	O
Çift Dalga Boyu UV Lambası	O	O
Ultra Arıtma Kartuşu	O	O
Mikro Filtrasyon Kartuşu	O	/
Ultra Filtrasyon Kartuşu	/	O
Kullanım Noktası Filtresi	O	O
Tank için Hava Filtresi Ağı	O	O
Uzaktan Su Dağıtıcısı	O	O

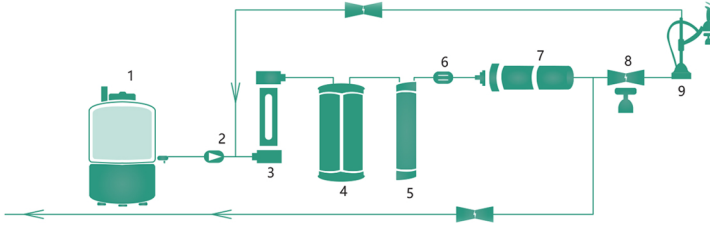

1. Su Tankı
2. Küresel Van
3. Çift Dalga UV Kartuşu
4. Arıtma Modülü
5. Ultra Arıtma Modülü
6. İletkenlik Sensörü
7. Ultra Filtrasyon Kartuşu
8. Kullanım Noktası Filtresi
9. Uzaktan Su Dağıtıcısı

Teknik Özellikler;

Model	INOS-PUV	INOS-PVF
Besleme Suyu İhtiyacı		
Kaynak	RO, Distile, DI su (İletkenlik <20µs/cm)	
Sıcaklık	5 - 40°C	
Ultra Arıtma Suyu (I. Sınıf)		
25°C'de Direnç	18.2MΩ.cm	
25°C'de İletkenlik	0.055us/cm	
Akış Hızı	1.5 - 2.0L/dk	
TOC Seviyesi*	1 - 5ppb	
Endotoksin (Pirojen)**	Yok	<0.001EU/ml
Parçacıklar (≥0.02µm)	<1pc/ml	
Bakteri*	<0.1cfu/ml	
Rnase/Dnase**	Yok	Serbest
Güç Kaynağı	110V/220V±10% 50Hz/60Hz	
Ana Ünite Ağırlığı (Nx B)	18kg - 31kg	
Su Tankı Ağırlığı (30L)	5kg - 13kg	
Ana Ünite Boyutu (GxDxY)	315x525x570mm	
Ana Ünite Ambalaj Boyutu	525x610x770mm	
Su Tankı Boyutu (30L)(GxDxY)	380x380x595mm	
Su Tankı Ambalaj Boyutu	520x440x615mm	



*Çift dalga UV modülünün benimsenmesi gerekiyor. Ayrıca besleme suyuna bağlı, önerilen besleme TOC >30ppb.

**Ultra filtrasyon modülünün benimsenmesi gerekiyor. Beslenme suyunun yukarıdaki gibi sağlanması gerekir.