

INOSP-E ASTM Tip II Yüksek Saf Su Sistemi

Özellikler;

INOROP-E Modern Elektredeiyonizasyon teknolojisi ile geliştirilmiş, Tip 2 yüksek saf su sağlayan sabit ve güvenilir, tamamlayıcı su arıtma teknolojisidir. Geliştirilmiş dokunmatik ekranı ile geniş görüş açılarında bile daha parlak renkler ve daha yüksek kontrast yakalamak mümkündür. Her sistem, kullanıcının sistem çalışmasını ve su kalitesini bir bakışta kontrol etmesini sağlayan arkadan aydınlatmalı bir ekrana sahiptir. Ve özel olarak kullanıcılara büyük oranda zaman kazandıracak kolay kullanım ve manuel veya otomatik teslimat seçenekleri mevcuttur.



Teknik Özellikler;


Model	INOSP-E
Besleme Suyu İhtiyacı	
Kaynak	Musluk Suyu
İletkenlik*	<2000us/cm
Sertlik **	CaCO ₃ olarak <450ppm
Basınç	0.05 - 0.5MPa (7-72psi)
Sıcaklık	5 - 40°C
Arıtma Suyu (III. Sınıf)	
İyonik Reddetme	>95%
Bakteri Reddetme	>99%
İletkenlik	1 - 20us/cm
Verimlilik Oranı	30L/s
Yüksek Kalite Arıtma Suyu (II. Sınıf)	
25°C'de Direnç	10MΩ.cm
TOC	<30ppb
Çözünmüş Organik	<0.1ppm
Verimlilik Oranı	15L/s
Güç Kaynağı	110/220V ±10% 50/60Hz
Ana Ünite Ağırlığı	32kg - 45kg
Su Tankı Ağırlığı (30L)	7kg - 15kg
Ana Ünite Boyutu (GxDxY)	315x525x570mm
Ana Ünite Ambalaj Boyutu	525x610x770mm
Su Tankı Boyutu (GxDxY)	380x380x595mm
Su Tankı Ambalaj Boyutu	520x440x615mm



*Besleme suyu kalitesi düşükse (İletkenlik >1000us/cm), güçlendirilmiş ön işlem modülü ve RO-2 tipi şiddetle tavsiye edilir.

**Besleme suyunun sertliği yüksek olduğunda (CaCO₃ olarak >450ppm), 0,5T su yumuşatıcı önerilir.

SMART Plus E

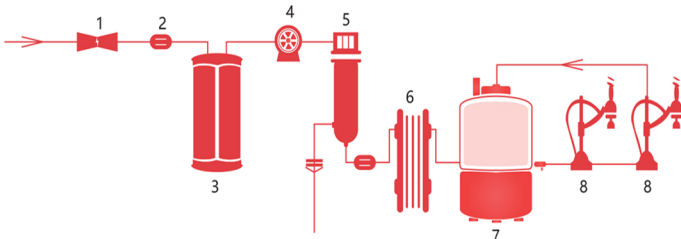

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Selenoid Vana | 5. RO Modülü |
| 2. İletkenlik Sensörü | 6. EDI Modülü |
| 3. Ön Arıtma Modülü | 7. Su Tankı |
| 4. Artırma Pompası | 8. Uzaktan Su Dağıtıcı |